


L-SID

Suction Irrigation Device

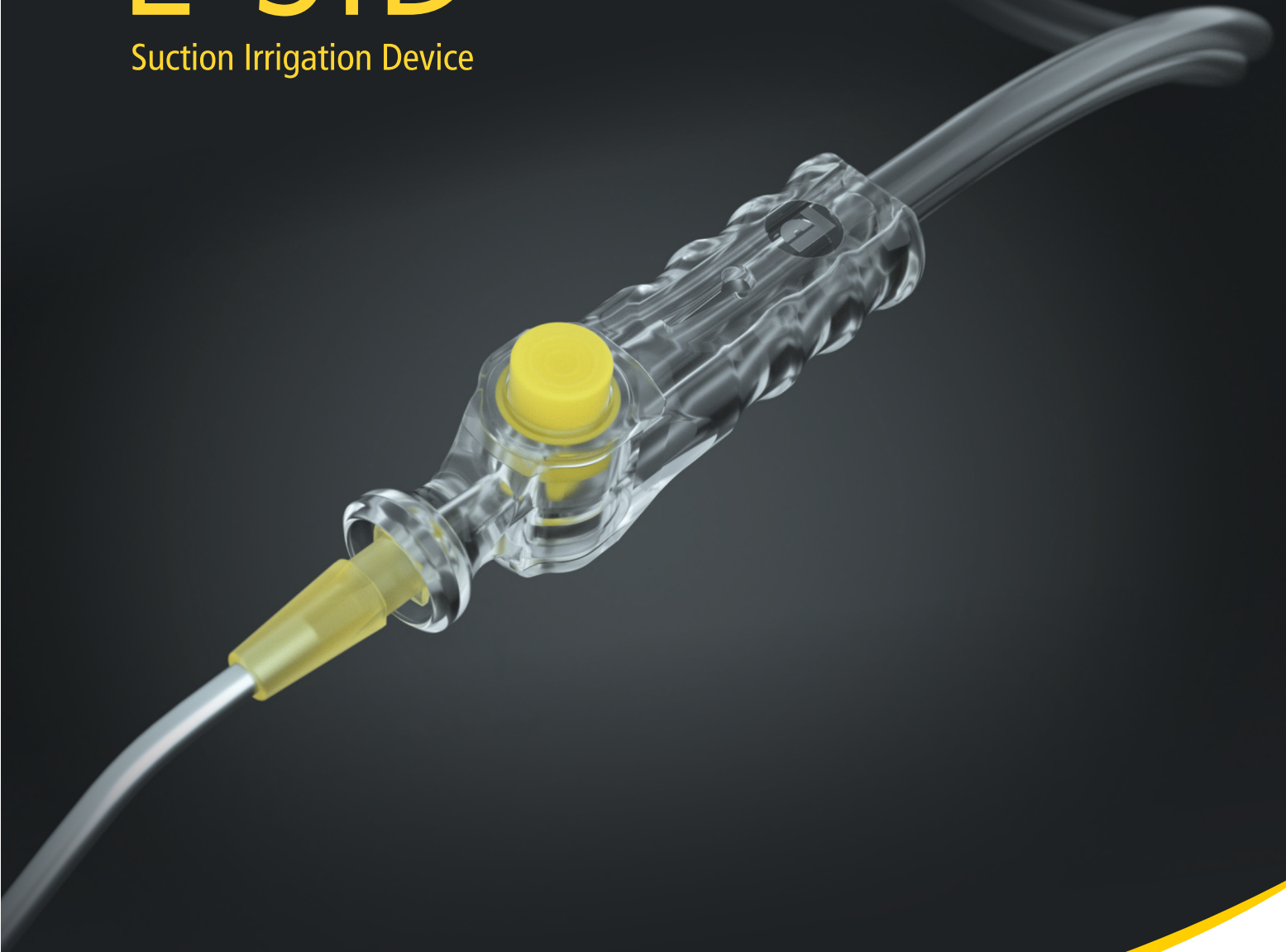

lazic.de

PETER LAZIC
MICROSURGICAL
INNOVATIONS

L-SID OUR DISPOSABLE SUCTION-IRRIGATION DEVICE FOR MICROSURGERY.


L-SID unser Einmal-Spülsauger für die Mikrochirurgie

Suction Irrigation L-SID optimizes workflow and efficiency in the OR. The ergonomic, transparent handle design and ease of use allow fatigue-free work even during longer microsurgical procedures. Without the help of additional OR staff, microsurgeons can perform the irrigation procedure themselves when using L-SID Suction Irrigation, thus enabling a better view to the surgical field.

Der Spülsauger L-SID optimiert Arbeitsabläufe und Effizienz im OP. Das ergonomische, transparente Griffdesign und die einfache Handhabung ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten auch bei länger andauernden mikrochirurgischen Eingriffen. Der Einsatz des Spülsaugers L-SID verschafft Mikrochirurgen darüber hinaus einen freien Blick auf das Operationsfeld, da sie den Spülvorgang selbst vornehmen können, statt dafür zusätzliches OP-Personal einzusetzen.



Application video
Anwendungsvideo

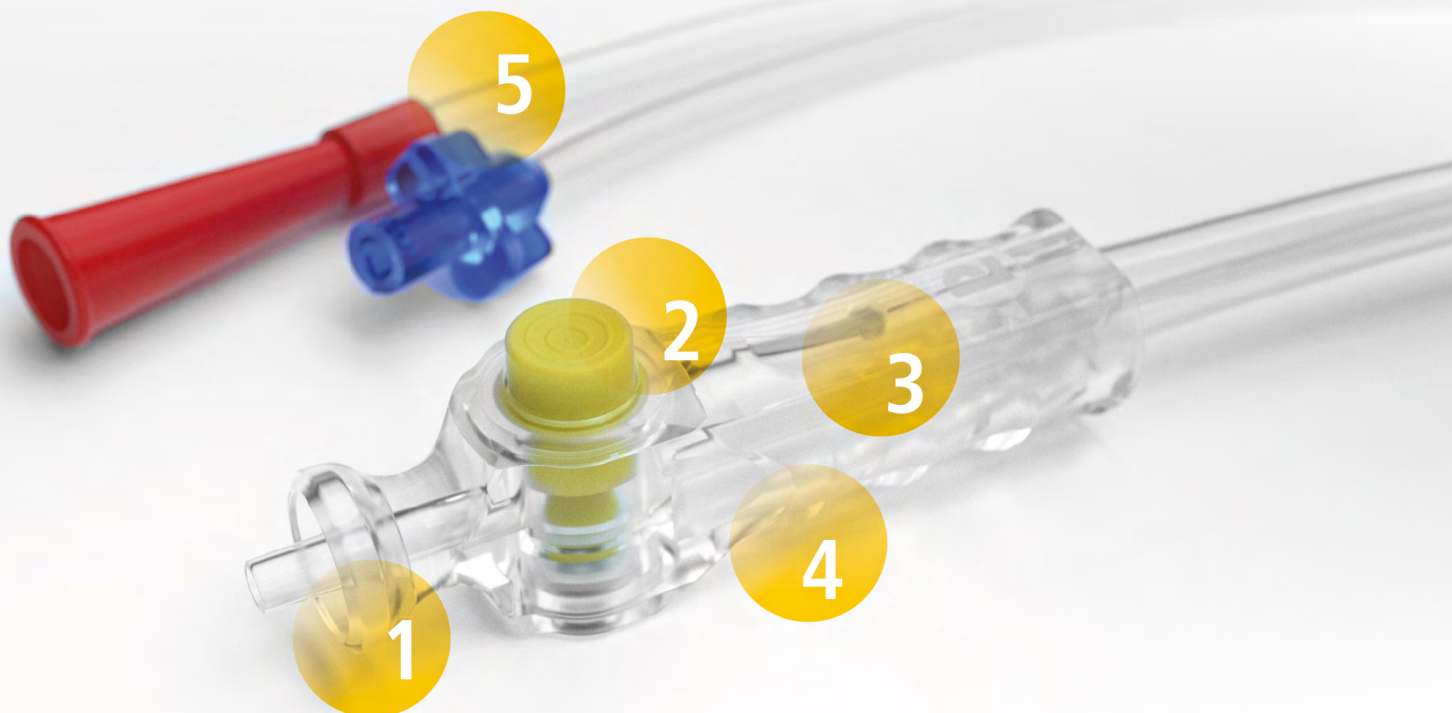



LUER-LOCK CONNECTOR

Luer-Lock-Anschluss

Various cannulas adaptable up to an inner diameter of 3 mm. Cannula can be rotated 360° as desired.

Verschiedene Kanülen bis zu einem Innendurchmesser von 3 mm adaptierbar.
Kanüle um 360° beliebig drehbar.



IRRIGATION BUTTON

Spülknopf

For switching from suction to irrigation with two in one function: irrigation and suction with one single device.

Zum Umschalten von Saugen auf Spülen. 2 in 1 Funktion: Spülen und Saugen in einem Produkt.



TEARDROP

Teardrop

For regulation of suction power. The teardrop opening allows optimal metering of air supply and suction power.

Zur Regulierung der Saugleistung. Durch die „Teardrop-Öffnung“ kann die Luftzufuhr und damit die Saugkraftleistung optimal dosiert werden.



ERGONOMIC HANDLE DESIGN

Ergonomisches Griffdesign

For fatigue-free work - even during extended use. Intuitive and easy operation of irrigation button and suction opening. Fast, on-demand switching from irrigation to suction and vice versa.

Für ermüdungsfreies Arbeiten – auch bei längerem Gebrauch. Intuitive und leichte Handhabung von Spülknopf und Saugöffnung. Schnelles, bedarfsgerechtes Umschalten von Spülen auf Saugen und umgekehrt. Maximale Flexibilität der angeschlossenen Schläuche.



COLOR CODED CONNECTORS

Farbkodierte Anschlüsse

To identify suction pump and irrigation device. With integrated sterile suction- and irrigation tube (3m) for easy and safe connection.

Für Absaugpumpe und Spülflüssigkeit. Mit integriertem, sterilem Saug- und Spülschlauch (3 m) zur einfachen und sicheren Konnektierung.

SUCTION POWER REGULATION (TEARDROP)


Saugleistungsregulierung (Teardrop)

Without active intervention, Suction Irrigation L-SID is in open circuit condition. The suction power can be regulated continuously by the amount of inflowing air at the teardrop opening.

- suction line is inactive
- irrigation line is closed

Ohne aktives Zutun befindet sich der Spülsauger „L-SID“ im Leerlaufzustand. Die Saugleistung lässt sich an der Teardrop-Öffnung stufenlos über die Menge einströmender Luft regulieren.

- Saugleitung ist inaktiv
- Spülleitung ist geschlossen

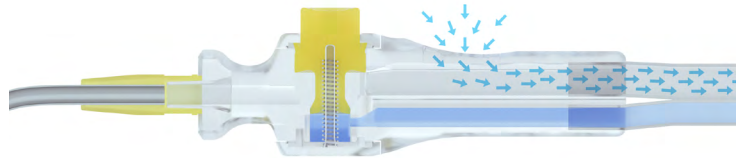

FUNCTIONAL PRINCIPLE SUCTION


Funktionsprinzip Absaugung

by closing the suction regulation (Teardrop)

- activation of suction line
- irrigation line is closed

durch Schließung der Saugregulierung (Teardrop)

- Saugleitung wird aktiv
- Spülleitung ist geschlossen

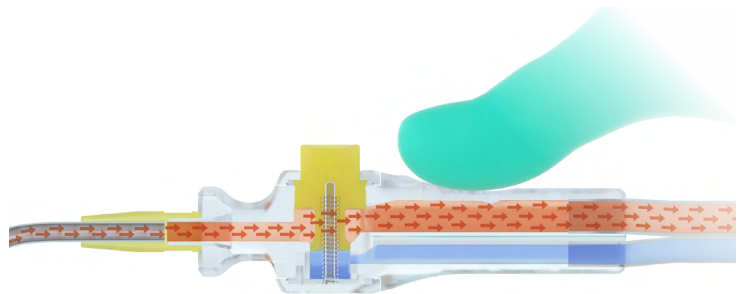

FUNCTIONAL PRINCIPLE IRRIGATION


Funktionsprinzip Spülen

by using the irrigation button

- activation of irrigation line
- deactivation of suction line

durch Betätigung des Spülknopfs

- Spülleitung wird freigegeben
- Saugleitung wird geschlossen

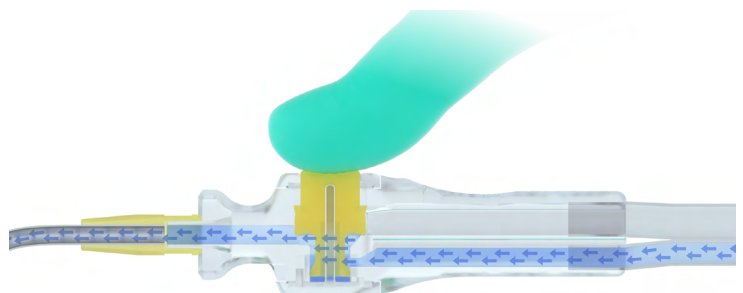




latex free

76.100.12

**Suction Irrigation Device sterile
with PVC-tube (3m), PU = 12 pcs.**

Spülsauger, steril mit PVC-Schlauch (3 m),
VE = 12 Stk.

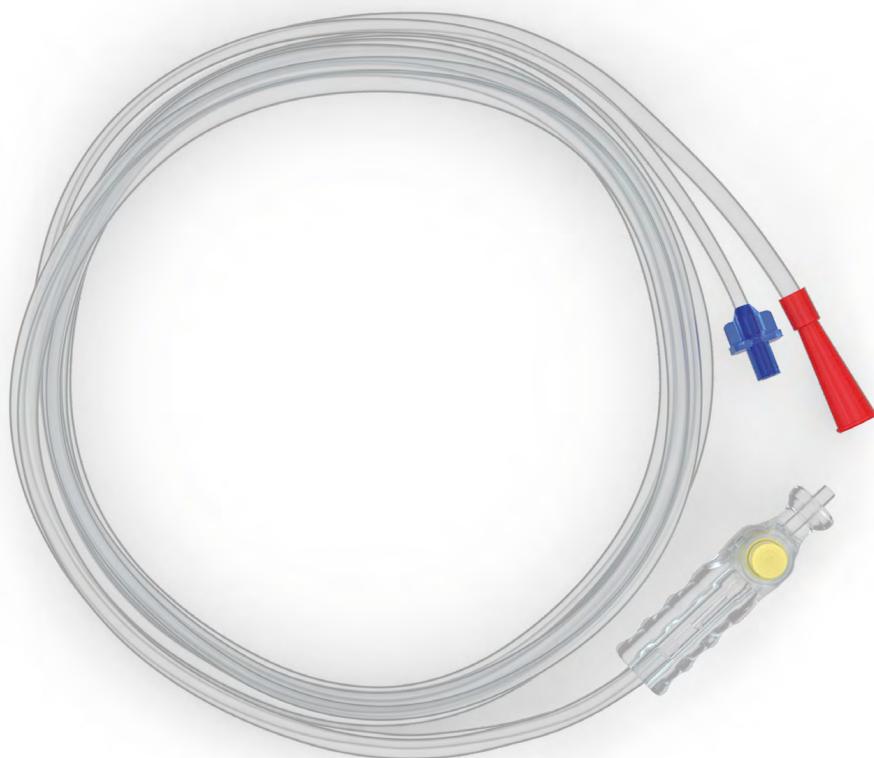

ACCESSORIES

Zubehör

Further accessories available on request:

- Cannulas (standard Luer-Lock)
in various lengths and diameters
- Pressure infusion cuff

Weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich:

- Kanülen (Standard-Luer-Lock) in verschiedenen
Längen und Durchmessern
- Druckinfusionsmanschette

SINGLE-USE CANNULAS

Einweg Kanülen

Can be combined with all cannulas with standard Luer-Lock connector up to 3 mm inner diameter. Cannulas in various lengths and diameters on request.

Kann mit allen Kanülen mit Standard-Luer-Lock-Anschluss bis zu einem Innendurchmesser von 3 mm kombiniert werden. Kanülen in verschiedenen Längen und Durchmessern auf Anfrage




6066500208
Tube/Rohr ø 2 mm, 70 mm,
PU = 60 pcs.

6066509200
Tube/Rohr ø 2 mm, 100 mm,
PU = 30 pcs

6066516020
Tube/Rohr ø 2 mm, 150 mm,
PU = 40 pcs.




6066500300
Tube/Rohr ø 3 mm, 80 mm,
PU = 30 pcs.

6066509300
Tube/Rohr ø 3 mm, 100 mm,
PU = 30 pcs.

6066516030
Tube/Rohr ø 3 mm, 150 mm,
PU = 40 pcs.

6066501
**Medibender, bending tool
for Metal Suction Tips
1,0 – 4,0 mm OD**
Medibender, Biegehilfe für
Metall-Saugspitzen
1,0 - 4,0 mm AD



REUSABLE CANNULAS

Mehrweg Kanülen

Can be combined with all cannulas with standard Luer-Lock connector up to 3 mm inner diameter. Cannulas in various lengths and diameters on request.

Kann mit allen Kanülen mit Standard-Luer-Lock-Anschluss bis zu einem Innendurchmesser von 3 mm kombiniert werden. Kanülen in verschiedenen Längen und Durchmessern auf Anfrage



70.152.10

Tube/Rohr ø 1,5 mm, 70 mm

70.152.11

Tube/Rohr ø 1,5 mm, 100 mm

70.152.13

Tube/Rohr ø 1,5 mm, 130 mm

70.152.14

Tube/Rohr ø 1,5 mm, 160 mm

70.152.20

Tube/Rohr ø 2,0 mm, 70 mm

70.152.21

Tube/Rohr ø 2,0 mm, 100 mm

70.152.23

Tube/Rohr ø 2,0 mm, 130 mm

70.152.24

Tube/Rohr ø 2,0 mm, 160 mm

70.152.30

Tube/Rohr ø 3,0 mm, 70 mm

70.152.31

Tube/Rohr ø 3,0 mm, 100 mm

70.152.33

Tube/Rohr ø 3,0 mm, 130 mm

70.152.34

Tube/Rohr ø 3,0 mm, 160 mm

70.152.40

Tube/Rohr ø 3,5 mm, 70 mm

70.152.41

Tube/Rohr ø 3,5 mm, 100 mm

70.152.43

Tube/Rohr ø 3,5 mm, 130 mm

70.152.44

Tube/Rohr ø 3,5 mm, 160 mm

19.102.02

**Storage tray for 9 tubes,
incl. lid, with inlays,
267 x 122 x 55 mm**

Lagerungscontainer für
9 Kanülen, inkl. Deckel,
mit Inlays, 267 x 122 x 55 mm



CE 0297

All rights reserved. Reprinting, also in excerpts, is forbidden. No part of the catalogue may be reproduced in any form or processed, duplicated or distributed using electronic systems without the written permission from PETER LAZIC GMBH.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise verboten. Kein Teil des Katalogs darf ohne schriftliche Einwilligung von PETER LAZIC GMBH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.



HEADQUARTERS

HAUPTSITZ

Peter Lazic GmbH

Microsurgical Innovations
Immelmannweg 2
78532 Tuttlingen
GERMANY

Tel. +49 (0) 7461 96643-0
Fax +49 (0) 7461 8745
info@lazic.de
www.lazic.de

Peter Lazic US Inc.

22 Clipper Way
Topsham, ME 04086
USA

Local: 603 427 8097
Fax: 603 501 0379
support@peterlazic.com
www.peterlazic.com